

本试剂盒只能用于科学研究，不得用于医学诊断

大鼠钙/钙调素依赖性蛋白激酶 II δ (CaMKII δ) ELISA 科研试剂盒活性

使用说明书

货号：WL053762

检测原理

试剂盒采用双抗体一步夹心法酶联免疫吸附试验 (ELISA)。往预先包被大鼠钙/钙调素依赖性蛋白激酶 II δ (CaMKII δ) 抗体的包被微孔中，依次加入标本、标准品、HRP 标记的检测抗体，经过温育并彻底洗涤。用底物 TMB 显色，TMB 在过氧化物酶的催化下转化成蓝色，并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的大鼠钙/钙调素依赖性蛋白激酶 II δ (CaMKII δ) 呈正相关。用酶标仪在 450nm 波长下测定吸光度 (OD 值)，计算样品活性。

样品收集、处理及保存方法

液体样本

- 1、血清：用无菌管收集，室温血液自然凝固 120 分钟或 2-8℃ 下过夜，在 2-8℃ 条件下离心 20 分钟 (3000 转/分)，小心仔细收集上清即可检测，或存储在 -20℃ 或 -80℃ 备用。但应避免反复冻融。
- 2、血浆：应根据标本的要求选择 EDTA 或肝素钠作为抗凝剂，混合均匀后 30 分钟内，2-8℃ 条件离心 20 分钟 (3000 转/分)，小心仔细收集上清即可检测，或存储在 -20℃ 或 -80℃ 备用。但应避免反复冻融。
- 3、尿液、胸腹水、脑脊液、唾液：用无菌管收集，2-8℃ 条件离心 20 分钟 (3000 转/分)。小心仔细收集上清，或存储在 -20℃ 或 -80℃ 备用。但应避免反复冻融。
- 4、细胞培养上清：用无菌管收集，2-8℃ 条件离心 20 分钟 (3000 转/分)，小心仔细

收集上清，或存储在 -20°C 或 -80°C 备用。但应避免反复冻融。

固体样本

1、动物组织样本：用预冷的 PBS (0.01M , $\text{pH}=7.4$)冲洗组织，去除残留血液，称重后将组织剪碎成小块。将剪碎的组织与对应体积的 PBS(一般按 1:9 的重量体积比，比如 1g 的组织样品对应 9mL 的 PBS，具体体积可根据实验需要适当调整，并做好记录。推荐在 PBS 中加入蛋白酶抑制剂)加入玻璃匀浆器中，在冰上(低温下)充分研磨。或者在组织研磨仪中进行研磨，如果需要进一步裂解组织细胞，可以对匀浆液进行超声破碎，最后将匀浆液 $2-8^{\circ}\text{C}$ 条件下 $5000\times\text{g}$ 离心 10 分钟，取上清进行检测。对于植物组织或其他组织样本，在玻璃匀浆器或组织研磨仪中匀浆不彻底的话，应在液氮中进行充分研磨。

2、细胞样本：

A、动物细胞：对于贴壁细胞，用适量预冷的 PBS 轻轻清洗细胞，并用胰蛋白酶消化分离细胞。以 $1000\times\text{g}$ 离心 5 分钟收集细胞(悬浮细胞可直接离心收集)。弃上清，用冷 PBS 清洗细胞 3 次。在浓度为 1×10^7 个细胞/mL 的冷 PBS 中重新悬浮细胞。用超声破碎仪充分破碎细胞，以使细胞破坏并放出细胞内成份。 $2-8^{\circ}\text{C}$ 条件离心 20 分钟(3000 转/分)，随后小心仔细取上清液进行检测。

B、植物细胞：用 $\text{pH}7.2-7.4$ 的 PBS 稀释细胞悬液，使细胞浓度达到 100 万/ml 左右，置于冰盒上，用超声破碎仪，充分破碎细胞。 $2-8^{\circ}\text{C}$ 条件离心 20 分钟(3000 转/分)，小心仔细收集上清进行检测。

3、咽拭子：加入 2ml 的 $\text{pH}7.2-7.4$ 左右的 PBS，溶解咽拭子头部，摇匀，用镊子取出咽拭子并挤干液体， $2-8^{\circ}\text{C}$ 条件离心 20 分钟左右(2000-3000 转/分)，仔细收集上清。分装一份待检测，其余冷冻备用，保存过程中如有沉淀形成，上样检测前应再次离心。

样本的要求

标本采集后尽早进行提取,提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验,样品在 2-8℃可保存时应在 6 天内使用,否则必须在-20℃(≤1 个月)或-80℃(≤2 个月)保存,应避免反复冻融。保存过程中如有沉淀形成,上样检测前应再次离心。不能检测含 NaN₃ 的样品,因 NaN₃ 抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。

自备物品

1. 酶标仪(450nm)

2. 高精度加样器及枪头: 0.5-10 μL、2-20 μL、20-200 μL、200-1000 μL

3. 37℃ 恒温箱

操作注意事项

1. 试剂盒保存在 2-8℃,使用前室温平衡 20 分钟。从冰箱取出的浓缩洗涤液会有结晶,这属于正常现象,水浴加热使结晶完全溶解后再使用。
2. 实验中不用的板条应立即放回自封袋中,密封(低温干燥)保存。
3. 活性为 0 的 S0 号标准品即可视为阴性对照或者空白;按照说明书操作时样本已经稀释 5 倍,最终结果乘以 5 才是样本实际活性。
4. 严格按照说明书中标明的时间、加液量及顺序进行温育操作。
5. 所有液体组分使用前充分摇匀。
6. 暂时用不到的酶标板条取下来放进铝箔袋备用,2-8℃保存。建议尽快使用。

试剂盒组成

名称	96 孔配置	48 孔配置	备注
微孔酶标板	8 孔×12 条	8 孔×6 条	无
标准品	0.3mL*6 管	0.3mL*6 管	无
样本稀释液	6mL	3mL	无
检测抗体-HRP	10mL	5mL	无

20×洗涤缓冲液	25mL	15mL	按说明书进行稀释
底物	12mL	6mL	无
终止液	6mL	3mL	无
封板膜	2 张	2 张	无
说明书	1 份	1 份	无

注：标准品（S0-S5）活性依次为：0、1.25、2.5、5、10、20 U/mL

试剂的准备

20×洗涤缓冲液的稀释：蒸馏水按 1：20 稀释，即 1 份的 20×洗涤缓冲液加 19 份的蒸馏水。

洗板方法

1. 手工洗板：甩尽孔内液体，每孔加满洗涤液，静置 1min 后甩尽孔内液体，在吸水纸上拍干，如此洗板 5 次。
2. 自动洗板机：每孔注入洗液 350 μ L，浸泡 1min，洗板 5 次。


操作步骤

1. 从室温平衡 20min 后的铝箔袋中取出所需板条，剩余板条用自封袋密封放回 4℃。
2. 设置标准品孔和样本孔，标准品孔各加不同活性的标准品 50 μ L。
3. 样本孔先加待测样本 10 μ L，再加样本稀释液 40 μ L，空白孔不加。
4. 除空白孔外，标准品孔和样本孔中每孔加入辣根过氧化物酶（HRP）标记的检测抗体 100 μ L，用封板膜封住反应孔，37℃水浴锅或恒温箱温育 60min。
5. 弃去液体，吸水纸上拍干，每孔加满洗涤液，静置 1min，甩去洗涤液，吸水纸上拍干，如此重复洗板 5 次（也可用洗板机洗板）。
6. 每孔加入底物 100 μ L，37℃避光孵育 15min。
7. 每孔加入终止液 50 μ L，15min 内，在 450nm 波长处测定各孔的 OD 值。

结果判断

绘制标准曲线：在 Excel 工作表中，以标准品活性作横坐标，对应 OD 值作纵坐标，绘

制出标准品线性回归曲线，按曲线方程计算各样本活性值。

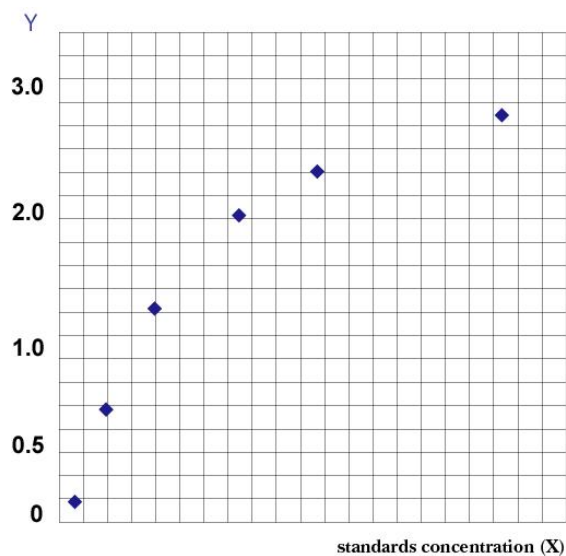

试剂盒性能

4. 准确性：标准品线性回归与预期活性相关系数 R 值，大于等于 0.9900。
5. 灵敏度：最低检测活性小于 0.1 U/mL。
6. 检测范围：0.1 – 20 U/mL。
7. 特异性：不与其它可溶性结构类似物交叉反应。
8. 重复性：板内、板间变异系数均小于 15%。
9. 贮藏：2–8℃，避光防潮保存。
10. 有效期：6 个月。

免责声明

1. 试剂盒仅供研究使用，不得用于临床实验或人体实验，否则所产生的一切后果，由实验者承担，本公司概不负责。
2. 严格按照说明书操作，实验者违反说明书操作，后果由实验者承担。